

Nordics Sonický zubní kartáček pro děti

Vlastnosti produktu

Sonický zubní kartáček Nordics CA2610 Kids řeší problém dětí, které mají potíže s čištěním zubů. Díky jemnému pulzujícímu pohybu kartáček zajišťuje hloubkové čištění, a to i s nerozvinutou jemnou motorikou dětské ruky nebo křivými mléčnými zuby, které zadržují plak.

Sonický zubní kartáček Nordics CA2610 Kids má 4 úrovně intenzity:

1. Úroveň jedna (obsahuje sedm barev bez vibrací):

Aktivací tohoto režimu spustíte sekvenci sedmi barev – červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Přechody barev se provádějí v 0,5sekundových intervalech bez vibrací a cyklus trvá 1 minutu. Tento režim je speciálně navržen pro děti ve věku 1 až 2 roky.

2. Úroveň dva (jemné čištění): Světlo zůstává během tohoto režimu konstantní a kartáček začne vibrovat, což poskytuje jemný zážitek z čištění. Doba trvání tohoto režimu je 2 minuty a je vhodný pro děti od 2 do 4 let.


3. Třetí úroveň (standardní čištění):

Přepnutím do tohoto režimu kartáček zesílí své vibrace a tím zajistí silnější čištění, protože světlo se mění na další barvu. Cyklus trvá 2 minuty a je doporučen pro děti ve věku 4 až 6 let.


4. Čtvrtá úroveň (intenzivní čištění): Zapněte tento režim pro nejintenzivnější čištění. Zde se světlo po třetí úrovni opět změní. Délka čtvrté úrovně je 2 minuty a je doporučena pro děti od 6 do 8 let.

Jak používat:


1. Vymáčkněte zubní pastu na kartáček

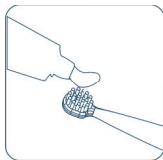


2. Vložte si kartáček do úst.

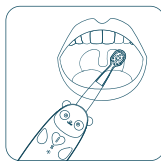

3. Chcete-li zvolit vhodný režim, jemně stiskněte spínač. Čas čištění je 2 minuty a po 30 sekundách se zobrazí připomenutí pro změnu oblasti čištění. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund jej vypnete.

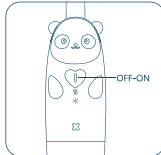

4. Pro čistší zuby by se každá oblast chrupu měla čistit 30 sekund.

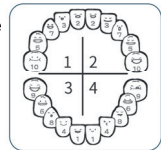

5. Vypláchněte si ústa šálkem vody a po vyčištění zubů kartáček omyjte vodou.



Charakteristika

Hlavice kartáčku s vlákny DuPont

Je vyrobena z amerického materiálu DuPont, vlákna jsou na konci zaoblená a odolná proti opotřebení. Při čištění výrazně chrání dásně dítěte.

Barevná světla

Rukojeť s motivem zvířátka s barevnými odlesky. Děti si kartáček zamulují a získají správný návyk pro ústní hygienu.

Rukojeť potažená silikonem

Unikátní a kreativní silikonový design je trojzrémý pro pohodlné držení a používání. Dětem dobře padne do ruky.

Bezpečnostní pokyny

1. Normální provozní teplota je 0–50 °C.
2. Pokud se zubní kartáček delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii a uložte ji do krabice na chladném místě.
3. Po čištění zubů se snažte hlavici kartáčku co nejlépe osušit.
4. Když je produkt v provozu, je výstupní výkon maximální. Je zakázáno nechat produkt pracovat nepřetržitě po delší dobu. Obecně by doba používání měla být kratší než 10 minut nepřetržitě.
5. Nikdy nechoďte ani neběhejte, když máte kartáček v ústech.
6. Děti by si měly zuby čistit vždy pod vaším dozorem.

Parametry

Motor kartáčku

Rozměry produktu: 160,5*35*35 mm

Jmenovité napětí: 1,5 V


Jmenovitý výkon: 0,51 W

Jmenovitý proud: 0,34 A

Vyrobeno v Číně

Výrobce: Norte LLC Sofia, Geo Milev 240, Bulharsko.

Distributor: Koboz Service s.r.o., Pražská 2879/155, 370 10 České Budějovice, Česká republika

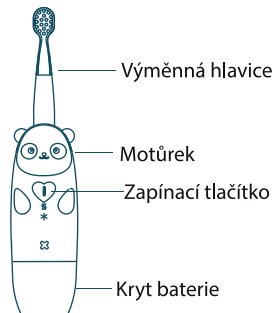

Nordics Sonická zubná kefka pre deti

Vlastnosti produktu

Sonická zubná kefka Nordics CA2610 Kids rieši problém detí, ktoré majú problémy s čistením zubov. Vďaka jemnému pulzujúcemu pohybu kefka zaisťuje hĺbkové čistenie, a to aj s nerozvinutou jemnou motorikou detskej ruky alebo krivými mliečnymi zubami, ktoré zadržujú povlak.

Sonická zubná kefka Nordics CA2610 Kids má 4 úrovne intenzity:

1. Úroveň jedna (obsahuje sedem farieb bez vibrácií):

Aktiváciou tohto režimu spustíte sekvenču siedmich farieb – červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová a fialová. Prechody farieb sa vykonávajú v 0,5 sekundových intervaloch bez vibrácií a cyklus trvá 1 minútu. Tento režim je špeciálne navrhnutý pre deti vo veku 1 až 2 roky.


2. Úroveň dva (jemné čistenie): Svetlo zostáva počas tohto režimu konštantné a kefka začne vibrovať, čo poskytuje jemný zážitok z čistenia. Doba trvania tohto režimu je 2 minúty a je vhodný pre deti do 2 do 4 rokov.

3. Tretia úroveň (štandardné čistenie): Prepnutím do tohto režimu kefka zosilní svoje vibrácie a tým zaistí silnejšie čistenie, pretože svetlo sa mení na ďalšiu farbu. Cyklus trvá 2 minúty a odporúča sa pre deti vo veku 4 až 6 rokov.


4. Štvrtá úroveň (intenzívne čistenie): Zapnutie tento režim pre najintenzívnejšie čistenie. Tu sa svetlo po tretej úrovni opäť zmení. Dĺžka štvrtej úrovne je 2 minúty a je odporúčaná pre deti od 6 do 8 rokov.

Ako používať:


1. Vytlačte zubnú pastu na kefku.

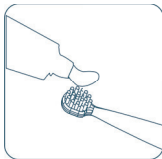


2. Vložte si kefku do úst.

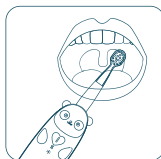

3. Ak chcete zvoliť vhodný režim, jemne stlačte spínač. Čas čistenia je 2 minúty a po 30 sekundách sa zobrazí pripomenutie pre zmenu oblasti čistenia. Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd ho vypnete.

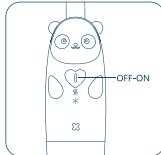

4. Pre čistejšie zuby by sa každá oblasť chrupu mala čistiť 30 sekúnd.

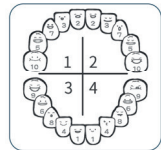

5. Vypláchnite si ústa šálkou vody a po vyčistení zubov kefku umyte vodou.



Charakteristika

Hlavica kefky s vláknami DuPont

Je vyrobená z amerického materiálu DuPont, vlákna sú na konci zaoblené a odolné proti opotrebovaniu. Pri čistení výrazne chráni dásna dieťaťa.

Farebné svetla

Rukoväť s motívom zvieratka s farebnými odleskami. Deti si kefku zamilujú a získajú správny návyk na ústnu hygienu.

Rukoväť potiahnutá silikónom

Unikátny a kreatívny silikónový design je trojrozmerý pre pohodlné držanie a používanie. Deťom dobre padne do ruky.

Bezpečnostné pokyny

1. Normálna prevádzková teplota je 0–50 °C.

2. Ak sa zubná kefka nebude dlhší čas používať, vyberte batériu a uložte ju do krabice na chladnom mieste.

3. Po čistení zubov sa snažte hlavicu kefky čo najlepšie osušiť.

4. Keď je produkt v prevádzke, je výstupný výkon maximálny. Je zakázané nechať produkt pracovať nepretržite po dlhšiu dobu. Všeobecne by doba používania mala byť kratšia ako 10 minút nepretržite.

5. Nikdy nechodte ani nebehajte, keď máte kefku v ústach.

6. Deti by si mali zuby čistiť vždy pod vašim dozorom. dohľad.

Parametry

Motor kartáčku
Rozmery produktu: 160,5*35*35 mm
Jmenovité napětí: 1,5 V
Jmenovitý výkon: 0,51 W
Jmenovitý proud: 0,34 A

Vyrobeno v Číně

Výrobce: Norte LLC Sofia, Geo Milev 240, Bulharsko.

Distributor: Koboz Service s.r.o., Pražská 2879/155, 370 10 České Budějovice, Česká republika

